

Desinfectiedoekjes geschikt voor gevoelige medische apparatuur

Sani-Cloth® AF³

Alcoholvrij

Sani-Cloth® AF³ is compatibel met meer dan 450 medische apparaten

Super Sani-Cloth®

Dubbele formule: quaternair ammonium en alcohol

Super Sani-Cloth® is compatibel met meer dan 800 medische hulpmiddelen

Sani-Cloth® Chlor

Sporendodend

Sani-Cloth® Chlor is compatibel met meer dan 900 medische hulpmiddelen



PDI's Compatible by Design™ systeem

Ons assortiment 'Compatible by design™' producten is ontwikkeld met het oog op compatibiliteit met medische apparatuur en oppervlakken in de gezondheidszorg, waardoor het zich onderscheidt op het gebied van infectiepreventie. Met PDI hoeft u nooit in te leveren op klinische effectiviteit om uw apparatuur te beschermen.

PDI biedt doekjes met geteste compatibiliteit op meer dan 2000 medische apparaten van toonaangevende merken, waaronder Mindray Healthcare, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips, FUJIFILM Sonosite en Samsung.

	Materiaal oppervlak	Aanwezig in	Sani-Cloth® Chlor doekjes	Super Sani-Cloth® doekjes	Sani-Cloth® AF ³ doekjes
Polymere	Polymethylmethacrylaat (PMMA)	Couveuses, infuuspompen, telefoonschermen, dialysemachines, röntgenbeschermingsschermen			
	Polyethyleen met hoge dichtheid	Chemicaliëncontainers, kabelisolatie, verpakking, behuizingen voor elektrische apparaten, trays, industriële plastic producten			
	Acrylonitril-butadien-styreen (ABS)	Toetsenborden, infuuspompen, inhalatoren, tracheale buizen, beademingskleppen, behuizingen voor elektrische apparaten, medische maskers, medische hulpmiddelen voor bloedtoegang			
	Polypropyleen	Chirurgische trays, buitenkant van toestellen, membraanoxxygenatoren, slangconnectoren, plastic flessen			
	Polycarbonaat	Infuuspompen, anesthesiecontainers, infuusdozen, veiligheidsbrillen, hemodialyseapparaten, bloedzuurstoftoestellen, bloedreservoirs, chirurgische instrumenten, endoscopieapparatuur, lenzen, infuusconnectoren			
	Marlite®	Wandpanelen			
	Polyvinylchloride	Bloed- en dialysezakken, infuuszakken, buizen, zuurstofmaskers, katheters, vloeren, elektrische snoeren, meubels, matrashoezen			
	Copolyester Tritan™	Transparante onderdelen voor hulpmiddelen			
	3Form™ Varia™	Vormbare acryl afdekkingen			
Stoffen	Polyurethaan	Bekleding, ziekenhuisbeddengoed, hoofdsteunen, armsteunen, chirurgische doeken, pakkingen, lampen, buizen, matrashoezen			
Metalen	Messing C260	Scalpels, scharen, pijpfittings			
	Aluminum 6061	Stethoscopen, scalpels, chirurgische trays, isolatiekarretjes, containers, brancards, stoelen, monitoren, leuningen, looprekken, rolstoelen, operatielampen			
	Gegalvaniseerd staal	Wagens, omhulsels, buizen, spijkers, bouten			
	Roestvrij staal 316	Operatietafels, krattenwagens, kasten, rolwagentjes, spoelbakken, thermometers, hemostaten, tangen, bedframes, meubilair, accessoires, balies			
	Aluminiumsilicaat	Bevestigingen, isolatoren, instrumentenschalen, looprekken, krukken, opvouwbare brancards			
Harde poreuze oppervlakken	Keramiek	Druksensoren, handgereedschap, kleppen, tegels			
	Porselein	Badkamers			
	Marmer	Werkbladen			


Legende:

Bij gebruik volgens voorschrift is er geen zichtbare verandering aan het oppervlak (beschadiging/degradatie).

Sommige zichtbare effecten kunnen worden waargenomen, zoals verkleuring bij langdurige blootstelling.

Zichtbare veranderingen aan het oppervlak (schade/degradatie) kunnen optreden bij langdurige blootstelling.

Gebruikelijke oppervlakte materialen

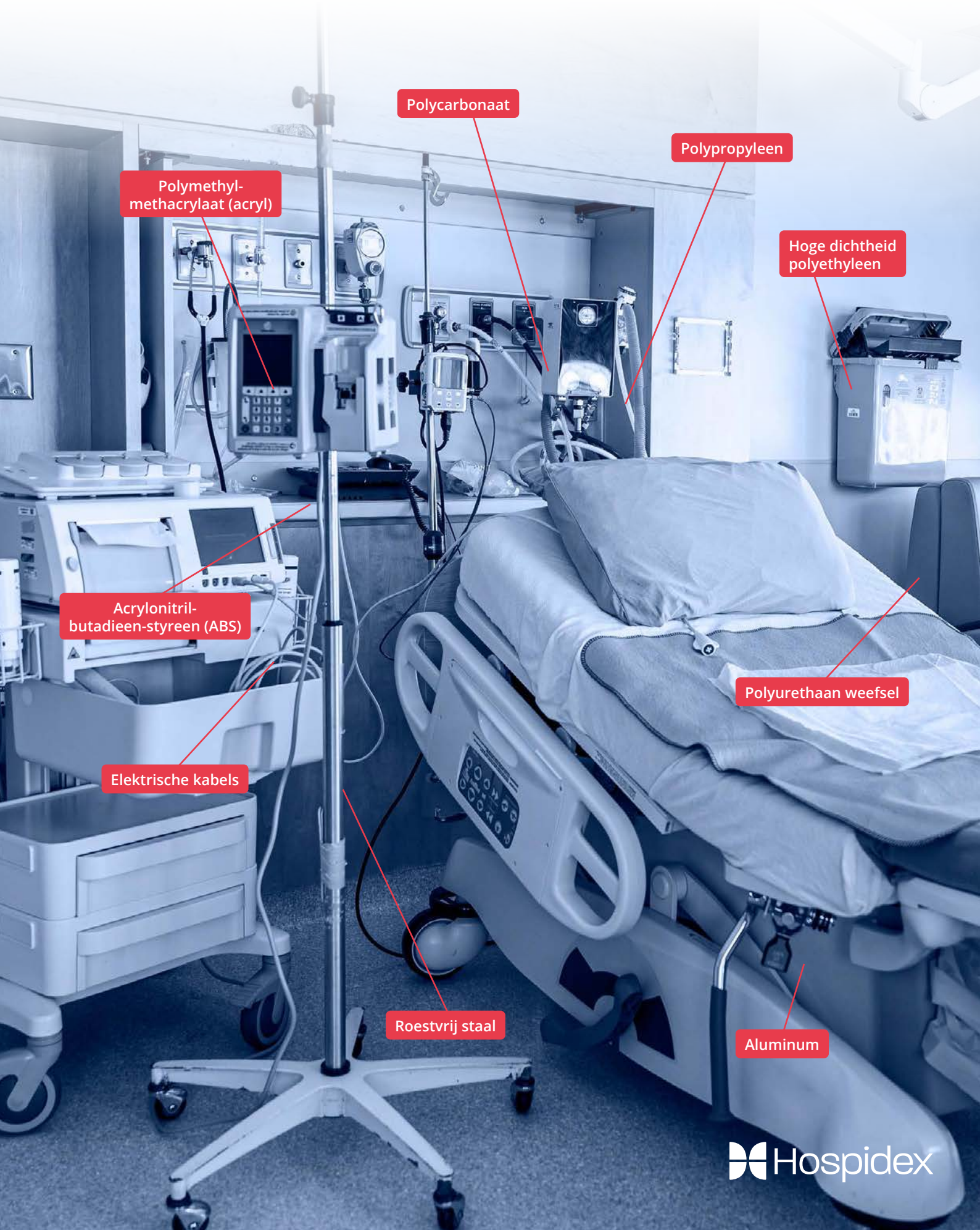



Sani-Cloth® AF³ doekjes zijn gebruiksklare, pluis-vrije, wegwerp 2-in-1 alcoholvrije reinigings- en ontsmettingsdoekjes voor niet-invasieve medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken. Sani-Cloth® AF³ kan gebruikt worden om medische hulpmiddelen voor te reinigen of te ontsmetten vóór sterilisatie. Latexvrij. Dermatologisch getest.



Super Sani-Cloth® doekjes zijn sneldrogende wegwerpreinigings- en ontsmettingsdoekjes van topkwaliteit die zeer geschikt zijn voor niet-invasieve medische hulpmiddelen en harde niet-poreuze oppervlakken. Super Sani-Cloth® kan worden gebruikt om medische hulpmiddelen voor te reinigen of te ontsmetten vóór sterilisatie. Latexvrij.



Sani-Cloth® Chlor is een sporicide, hoog-niveau desinfectiedoekje voor eenmalig gebruik voor niet-invasieve medische hulpmiddelen en harde niet-poreuze oppervlakken. Deze gebruiksklare, pluisarme doekjes kunnen worden gebruikt voor reiniging en desinfectie in één enkel product. Sani-Cloth® Chlor kan worden gebruikt om medische hulpmiddelen voor te reinigen of te ontsmetten vóór sterilisatie. Latexvrij.

Type	Test-methode	Micro-organisme	Contact-tijd (d)
Bacteriedodend	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	60 sec
	EN 13727	Staphylococcus aureus	60 sec
	EN 13727	Enterococcus hirae	60 sec
Gistdoden	EN 16615	Candida albicans	60 sec
	EN 13624	Candida albicans	60 sec
	EN 13624	Candida auris	60 sec
Virusdoden (omhulde virussen)	EN 14476	Vaccinia Virus	60 sec
	EN 14476	Corona, HIV, hepatitis B en C, SARS, influenza*	60 sec
Virusdoden (niet-ontwikkelde virussen)	EN 14476	Norovirus	60 sec
Tuberculocide	EN 14348	Mycobacterium terrae	60 sec

*Alleen voor medische hulpmiddelen / (d)= vuile omstandigheden

Type	Test-methode	Micro-organisme	Contact-tijd (c)	Contact-tijd (d)
Bacteriedodend	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec	60 sec
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec	60 sec
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec	60 sec
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec	60 sec
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec	60 sec
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec	60 sec
Gistdoden	EN 16615	Candida albicans	60 sec	60 sec
	EN 13624	Candida albicans	30 sec	—
	EN 13624	Candida auris	30 sec	—
Virusdoden (omhulde virussen)	EN 14476	Vaccinia virus	60 sec	60 sec
	EN 14476	Corona, HIV, hepatitis B en C, SARS, influenza	30 sec	60 sec
Virusdoden (niet-ontwikkelde virussen)	EN 14476	Norovirus	30 sec	60 sec
Tuberculocide	EN 14348	Mycobacterium terrae	60 sec	60 sec

(c)= Schone omstandigheden / (d)= Vuile omstandigheden

Type	Test-methode	Micro-organisme	Contact-tijd (c)	Contact-tijd (d)
Bacteriedodend	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec	2 min
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec	2 min
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec	2 min
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec	—
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec	—
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec	—
Gistdoden	EN 16615	Candida albicans	60 sec	2 min
	EN 13624	Candida albicans	60 sec	—
	EN 13624	Candida auris	30 sec	—
Virusdoden (omhulde virussen)	EN 14476	Vaccinia Virus	30 sec	60 sec
	EN 14476	Corona, HIV, hepatitis B en C, SARS, influenza	30 sec	60 sec
Virusdoden (niet-ontwikkelde virussen)	EN 14476	Norovirus	60 sec	60 sec
	EN 14476	Adenovirus	60 sec	60 sec
	EN 14476	Poliovirus	60 sec	60 sec
Sporicide	EN 17846	C. difficile	60 sec	60 sec

(c)= Schone omstandigheden / (d)= Vuile omstandigheden



Houder voor dispenserdoos

Onze dispenserdooshouder houdt Sani-Cloth® doosjes zo dicht mogelijk bij het gebruikspunt om de beschikbaarheid en het met één hand dispensereren van doekjes te vergemakkelijken en zo het risico op kruisbesmetting te verminderen.

Flowpack zakjeshouder

Onze flowpack-houder maakt het mogelijk om Sani-Cloth® zakjes zo dicht mogelijk bij het gebruikspunt te plaatsen, terwijl het deksel op zijn plaats blijft, wat het uitdelen van de doekjes met één hand vergemakkelijkt. Bovendien bevat de houder antimicrobiële additieven waarvan is aangetoond dat ze de bacteriegroei tot 99,99% verminderen (ISO 22196:2011).



www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by Hospidex nv/sa
Grijpenlaan 23, B-3300 Tienen
Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

HOSPIDEX BV
Lorentzstraat 101
2665 JG Bleiswijk
Netherlands
Tel: +31 79 7370000